

VM-2500-M / VM-2500-S

Combina capnografía de alto rendimiento, sidestream o mainstream, con monitorización de SpO₂

- Diseño robusto y ergonómico
- Rápido tiempo de calentamiento
- Tiempo de respuesta rápido
- Medida extremadamente precisa y fiable
- Combina CO₂ Y SPO₂
- Displays EtCO₂, FiCO₂, SpO₂, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, capnograma y pletismograma.
- Calibración y mantenimiento muy sencillo
- Pantalla a color OLED que ofrece una claridad superior.
- Para pacientes intubados y no intubados



Mainstream unidad



Sidestream unidad



El VM-2500-M Y VM-2500-S es un dispositivo ultra compacto y ergonómico que combina una capnografía de alto rendimiento y fiabilidad, mainstream o sidestream, con la monitorización de la SpO₂.

Combina las tecnologías más innovadoras y el diseño con los más modernos materiales, para crear una medida extremadamente precisa y fiable para pacientes intubados y no intubados.

La unidad mainstream, utiliza el avanzado analizador IRMA para determinar con precisión la cantidad de CO₂ en la mezcla.

La unidad sidestream, utiliza el analizador ISA CO₂ con la tecnología Nomo para eliminar los problemas causados por las secreciones de agua en la lectura.

Estas unidades incorporan la última tecnología de pantalla de LED orgánico, ofreciendo una claridad sin igual, incluso en las más difíciles condiciones de iluminación.

El VM-2500-M Y VM-2500-S, se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, desde el uso en situaciones de rescate de emergencia, durante la cirugía, cuidados intensivos, reanimación y el traslado del paciente.

VM-2500-M Mainstream, Monitor CO₂ Y SpO₂



Características del VM-2500-M

- Medida de CO₂ Mainstream con analizador IRMA
- Tiempo de calentamiento rápido <10seg para cumplir especificaciones
- Tecnología de conectar y medir, no necesita procedimientos de integración
- No se obstruye ni con agua ni con mucosidad la muestra
- Adaptador IRMA para vía aéreas con XTP
- Pequeño, ligero y resistente, el analizador IRMA CO₂, pesa menos de 30gr intrusión de agua y la contaminación cruzada
- Medición directa, sin tiempo de retraso
- Para pacientes intubados y no intubados utilizado desde pacientes adultos a neonatos
- Fácil mantenimiento y calibrado
- Disponible un amplio rango de sensores para SpO₂

Pack estándar

- Unidad mainstream
- Analizador IRMA CO₂
- Adaptador IRMA para vías aéreas (adulto/pediátrico)
- Sensor reutilizable de SpO₂
- Cable USB para descargar datos
- Cargador a red
- 4 x baterías AA
- 1 x Batería Li-ion recargable
- Protector de silicona
- PC Software
- Manual de instrucciones

Por favor seleccionar a la hora de hacer el pedido entre los diferentes tipos de sensores: Sensor reutilizable de silicona (Adulto o pediátrico), sensor de pinza, sensor semidesechable o de oreja.

VM-2500-S Sidestream, Monitor CO₂ Y SpO₂



Características del VM-2500-S

- Medida de CO₂ sidestream con analizador ISA con tecnología Nomo
- Tiempo de calentamiento rápido <10seg para cumplir especificaciones
- El adaptador Nomo usa tecnología nomo que elimina el agua y el vapor del gas de
- El adaptador Nomo incluye un filtro bacteriano hidrófobo de protección contra la
- Específicamente diseñado para aplicaciones de bajo caudal: 50ml/min, puede ser
- Para pacientes intubado y no intubados
- Fácil mantenimiento y calibrado
- Disponible un amplio rango de sensores para SpO₂

Pack estándar

- Unidad sidestream
- Adaptador Nomo
- Línea de muestras
- Adaptador sidestream para vías áreas (adulto/pediátrico)
- Sensor reutilizable de SpO₂
- Cable USB para descargar datos
- Cargador a red
- 4 x baterías AA
- 1 x Batería Li-ion recargable
- Protector de silicona
- PC Software
- Manual de instrucciones

Por favor seleccionar a la hora de hacer el pedido entre los diferentes tipos de sensores: Sensor reutilizable de silicona (Adulto o pediátrico), sensor de pinza, sensor semidesechable o de oreja.

Sensores SpO₂

Disponible una amplia gama de sensores de SpO₂: Sensores de 3rd generación, tanto adulto como pediátrico, sensores de pinza, semidesechables, de oreja y sensores desechables desde adultos a neonatos.

Disponible por primera vez un sensor de silicona esterilizable en autoclave a 134°C, eliminando así el riesgo de infección cruzada.



Sensor de silicona adulto



Sensor de silicona pediátrico



Sensor de pinza



Sensor semidesechable



Sensores desechables




Sensor de oreja

Accesorios VM-2500-M

Medida mainstream

El analizador de CO₂ IRMA establece nuevos estándares proporcionando una medición de CO₂ segura y fácil por medición directa y sin tiempo de retraso.

- Pequeño y ligero
- Medición directa
- Resistente

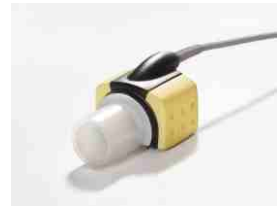

Analizador IRMA™ de CO₂

El adaptador para vía aéreas IRMA se puede suministrar en dos versiones: Adulto/pediátrico e infantil.

- Tecnología XTP sin condensación
- Uso para un solo paciente



Adaptador para vías aéreas IRMA™

Accesorios VM-2500-S

Medida sidestream

El analizador ISA de CO₂, junto con la tecnología Nomo que elimina el agua de los gases de la muestra, ofrece el mayor rendimiento en un formato ultra compacto.

El adaptador Nomo incluye un separador de agua hecho de un polímero especial con un filtro bacteriano hidrófobo.

La tecnología Nomo nos permite hasta dos semanas de continua monitorización, por primera vez en la capnografía.

El adaptador Nomo contiene un filtro bacteriano hidrófobo (>99.9980%) para proteger el analizador ISA de CO₂ de la intrusión de agua y la contaminación cruzada.



Adaptador Nomo



Línea de muestra




Adaptador adulto/pediátrico



Adaptador infantil

El VM-2500-M Y VM-2500-S es un dispositivo ultra compacto y ergonómico que combina una capnografía de alto rendimiento y fiabilidad, mainstream o sidestream, con la monitorización de la SpO₂

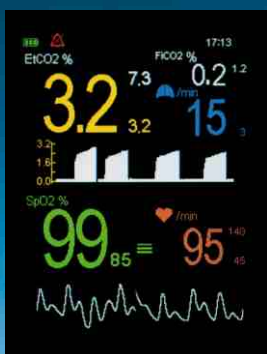

Campo de medición

EtCO ₂ y FiCO ₂	0 - 15%
SpO ₂	0 - 100%
Frecuencia respiratoria	0 - 150 espiraciones/min
Frecuencia cardiaca	20 - 300 pulsaciones/min

Precisión

EtCO ₂ y FiCO ₂	+/- (0.2 vol % + 2% de la lectura)
SpO ₂	+/- (0.3% vol % + 4% de la lectura) incluye interferencia de gases +/- 2% (70 - 100%)
Frecuencia respiratoria	+/- 1 dígito at 60 respiraciones/min
Frecuencia cardiaca	+/- 1 dígito (≤ 100/min) o +/- 1% (> 100/min)

Pantalla

Características	OLED color, 262,000 colores, 240 por 320 pixels
-----------------	---

Datos

End tidal CO₂, CO₂ inspirado en volumen%, kPa o mmHg,
SpO₂, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, capnograma,
pletismograma, gráfico de barras y gráfico.

Tendencias

Indicadores Intensidad y calidad de la señal, amplitud de pulso, estado de la batería,
alarma silenciada, volumen silenciado, modo neonatal, hora y capacidad total de almacenamiento.

Información tendencias

Corto plazo	15 min / 1 hr / 6 hrs (Se guardan y se recuperan)
Largo plazo	aprox. 400 hours (Se guardan)

Condiciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C, 15 - 95% R.H. (sin condensación), 60 - 120 kPa (excl. Batería Li-ion)
Temperatura de almacenamiento	-30 - 70 °C, 10 - 95% R.H. (sin condensación), 60 - 120 kPa (excl. Batería Li-ion)

Regulaciones

Estándar	CE Class IIb in accordance with MDD 93/42/EEC BS EN 60601-1:2006, BS EN 60601-1-1:2001, BS EN 60601-1-2:2007 BS EN 60601-1-8:2004, EN 60529, EN ISO 21647:2004, BS EN ISO 9919:2005 Class II, Type BF
Seguridad	

Varios

Construction	IPX1
Dimensiones	150 mm x 75 mm x 35 mm
Peso	aprox. 400gr (incluidas baterías)
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación 90-260 VAC/6 VDC, 50-60 Hz, 4 x AA baterías, 2.5 Ah Li-ion batería
Duración de la batería	Más de 6 hrs funcionando de forma continua
Interfaz de comunicación	USB 2.0

Números de serie

VM-2500-M Capnógrafo mainstream*	4410500
VM-2500-S Capnógrafo sidestream*	4410520

*Paquete idioma: Europeo central, incluye:

Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Sueco y Ruso (Versiones en otros idiomas disponibles según requerimientos).

VM-2500-M Paquete idioma Asiático incluye:	4410501
--	---------

Inglés, Chino y Japonés (Versiones en otros idiomas disponibles según requerimientos).

VM-2500-S Paquete idioma Asiático incluye:	4410521
--	---------

Inglés, Chino y Japonés (Versiones en otros idiomas disponibles según requerimientos)

Por favor seleccionar a la hora de hacer el pedido entre los diferentes tipos de sensores:

Sensor reutilizable de silicona (Adulto o pediátrico), sensor de pinza, sensor semidesechable o de oreja.

Especificaciones sujetas a cambio.

CE0086

Distribuido por:



VIAMED

Viamed Limited • 15 Station Road • Cross Hills
Keighley • West Yorkshire • BD20 7DT • United Kingdom
Tel: +44 (0)1535 634542/636757 Fax: +44 (0)1535 635582
info@viamed.co.uk www.viamed-online.com



BS EN ISO 9001:2000
ISO 13485:2003
ISO 13485:2003 CMDCAS Recognised

FS 28344 MD 78787